


aks-viscplot

Die logische Weiterentwicklung der aks-theraplot, mit viscoelastischer Liegefläche

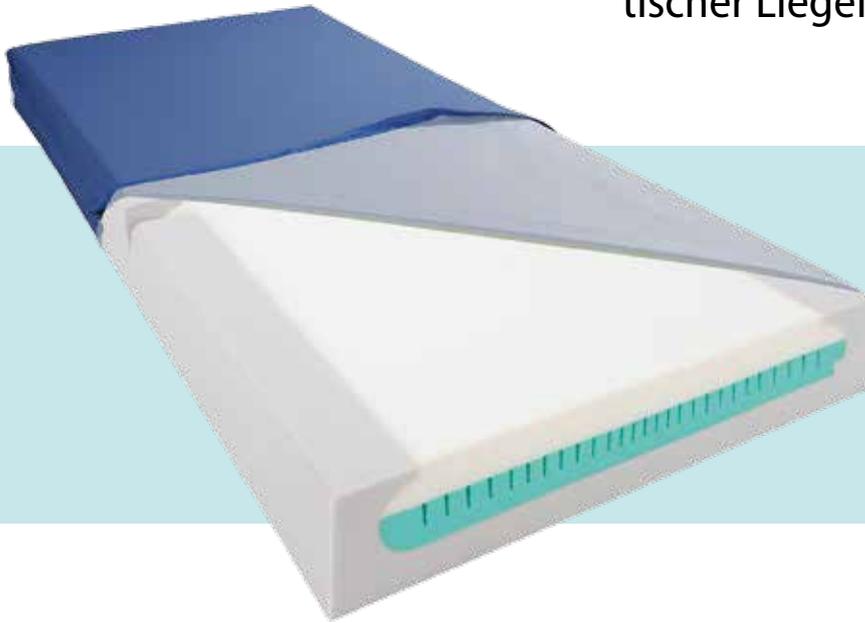

**BIS
GRAD III
EPUAP**

Druckentlastung
KLASSE H
Patientengewicht 80 kg
Patientengewicht 150 kg

mit inkoair® Matratzenhülle

Antidekubitus-Weichlagerungsmatratze aus Schaumstoff, die als High End-Produkt, auch den allerhöchsten Ansprüchen genügt.

Die Vorteile der aks-viscplot

- besonders gut für kachektische Patienten und zur Schmerztherapie geeignet
- große Auflagefläche aus weichem, viscoelastischem Schaumstoff, passt sich dem Körperprofil perfekt an und sorgt für maximale Auflagefläche
- die würfelförmigen Einschnitte in der grünen Mittelschicht begünstigen das Mikroklima
- abgestufte, unterschiedliche Stauchhärten, in Kombination mit viscoelastischer Auflagefläche für ein Patientengewicht von 30 bis 150 kg
- optimale Anpassung der Matratze an viergeteilte Liegeflächen durch dreimalige Einschnitte
- beidseitige Randzonenverstärkung zur Unterstützung der Mobilisierung des Patienten
- bestens geeignet für den Wiedereinsatz
- optional: Matratzenverlängerung (20 cm) zur Versorgung größerer Patienten
- inklusive inkoair® Matratzenhülle, schwer entflammbar nach BS 7175 (Crib 5) und biokompatibel nach ISO 10993-5
- Lieferung der Matratzen bezogen, vakuumiert und gerollt

Patientengewicht 30-150 kg
Zur Dekubitusprophylaxe und zur Therapieunterstützung bis Grad III (nach EPUAP)

HMV-Nummer

aks-viscplot - 11.29.05.0023

Bestellnummern

Matratze mit inkoair® Matratzenhülle

90 x 200 x 17 cm - 04733

100 x 200 x 17 cm - 04734

inkoair® Matratzenhülle

90 x 200 x 17 cm - 49000

100 x 200 x 17 cm - 49001

Matratzenverlängerungsset 20 cm

inkl. inkoair® Matratzenhülle

90 x 220 x 17 cm - 49005

L-XXL Schaumstoffmatratzen finden Sie in der L-XXL und bariatrischen Pflege!