

## Etac PediTurn



Die Drehscheibe unterstützt Drehbewegungen um die eigene Achse. Dies verhindert ein Überdrehen der unteren Gelenke bei dem Patienten und das Überdrehen des Beckengürtels oder der Lendenwirbelsäule bei der Pflegekraft während eines Transfers.

Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung, z.B. nach einer Beinamputation oder bei Morbus Parkinson, eine Unterstützung der Fußstellung benötigen, empfinden die Drehscheibe als eine Erleichterung, da ein knieschonender Transfer erst mit einer Drehscheibe ermöglicht wird. Das Besondere: Sie funktioniert auch dort, wo andere, starre Scheiben nicht einsetzbar sind, weil sie nicht nachgeben.

### PediTurn ist in zwei Varianten erhältlich:


- Etac PediTurn mit einem weichen Kissen, für Benutzer die keine Schuhe tragen
- Etac PediTurn, hart, für Benutzer die Schuhe tragen



PediTurn



PediTurn hart

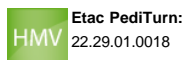

Etac PediTurn:  
22.29.01.0018

### Verwendungszwecke

- Unterstützt die Fuß- und Beinbewegung bei einem Transfer im sitzen
- Transfer zwischen Bett und Rollstuhl
- Transfer zwischen Rollstuhl, Stuhl, Dusch-Rollstuhl, Toilette und Toilettenstützgestell

Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.
PediTurn, Drehkissen	40 cm	IM99836GT
PediTurn, Drehscheibe, hart	38 cm	IM99700

### Technische Daten

#### PediTurn, Drehkissen

Oberseite:	Toughtek
Unterseite:	Toughtek
Füllung:	Nylon
Mittelteil:	Polyethylen

#### PediTurn, Drehscheibe, hart

Material:	ABS/TPU
Innen:	HDPE
Befestigung:	Messing/Stahl

Max. Belastbarkeit:	150 kg
---------------------	--------



### Waschanleitung

Kann mit einem feuchtem Tuch abgewischt werden.



Sie sind hier: [Produkte](#) / [Transfer/Umlagerung](#) / [Transfer - "Sitzend"](#) / [PediTurn](#)

---

Etac GmbH | Bahnhofstraße 131 | 45770 Marl | Telefon: 02365-9871-0 | Fax: 02365-986115 | E-mail: [info@etac.de](mailto:info@etac.de) | Etac International: [www.etac.com](http://www.etac.com)