



Tango®

Der Standard Elektrorollstuhl
für Ihr Flottenmanagement

Tango



Schneller Wiedereinsatz und einfache Anpassung

Mit wenigen Handgriffen Teile austauschen und Anpassungen vornehmen. Reduzierte Komplexität für einfacheres Handling – schnell und ohne Verzicht auf bewährte Qualität.

- Einfaches, robustes Einsteigermodell für die Fallpauschale.
- Schnell und einfach anpassbar. Damit variabel einsetzbar.
- Weniger Teile + Weniger Service = Niedrige Instandhaltungskosten = Hohe Wirtschaftlichkeit.



Der Quickie Tango ist für das Mehr an Sicherheit beim Transport nach ISO 7176-19 Crash getestet. Er ist damit zum Transport von Personen im Rollstuhl sitzend im Fahrzeug zugelassen, was insbesondere für Fahrdienste, z. B. Fahrten zum Arzt, sehr wichtig ist, da die Patienten damit nicht zwingend in einen Autositz umgesetzt werden müssen.



Steuerung VR2

Mit Bedienpult parallel abschwenkbar, um besser an Tische heranfahren zu können



Seitenteil mit Armlehne höhenverstellbar

Zur optimalen Anpassung an den Nutzer



Fußraste hochschwenkbar

Zur Lagerung der Beine (manuell/elektrisch)

Sitzposition

Die Sitzneigung ist zur Druckentlastung von 0° bis 9° und der Rückenwinkel von -3° bis 12° manuell einstellbar. Beides alternativ auch gegen Aufpreis mit Gasdruckfeder oder elektrisch erhältlich (Sitzneigung: 3° bis 25°; Rückenwinkel: -3° bis 30°)

Sitzneigung und Rückenwinkel

Zur Druckentlastung und für bessere Sitzstabilität manuell verstellbar über Gasdruckfeder. Elektrische Verstellmöglichkeit jederzeit gegen Aufpreis nachrüstbar



Rückenbespannung

Zur optimalen Positionierung individuell anpassbar



Komfort-Sitzsysteme

Optional gegen Aufpreis auch mit Komfort-Sitz- und Rücken-system für eine optimale Sitzposition und beste Sitzstabilität erhältlich

Spritzschutz

Optional gegen Aufpreis wählbar



Volle Flexibilität ganz nach Anforderung

Luftbereifung für mehr Fahrkomfort, pannensichere PU-Bereifung für mehr Sicherheit. Antriebsrad wahlweise in 12" oder 14"



Bürgersteighilfe

Optional für Kanten bis zu 10 cm (Aufpreis)



Sitztiefe einstellbar

Von 42,5 bis 50 cm je nach Nutzer individuell einstellbar



Rücken

Nach vorne abklappbar für platzsparenden Transport, z. B. im Auto

Flexibilität beim Wiedereinsatz

Ohne zusätzliche Teile schnelle Anpassung der Sitzbreite



2-fache Federung

Für sicheres und komfortables Vorankommen



Licht und Blinker

Für ein Maximum an Sicherheit im Außenbereich

Niedrige Service- und Instandhaltungskosten

Dank einfachem Zugriff auf die Batterien


Tango®



Verstellmöglichkeiten des Sitzsystems

Sitzbreite	40 bis 50 cm	Sitzneigung	-3° bis 25°
Sitztiefe	42,5 bis 50 cm	Rückenhöhe	45 / 47,5 / 50 cm
Sitzhöhe	43 cm (mit 3° Neigung)	Rückenwinkel	-3° bis 30°
Sitzwinkel	0°, 3°, 6°, 9°	Armlehnenhöhe	27 bis 36 cm


Bodenfreiheit

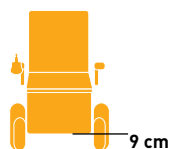


Gesamtbreite 58 cm mit 12" Rädern 60 cm mit 14" Rädern




Gesamtlänge inkl. Fußraste Min. 107 cm Max. 110 cm

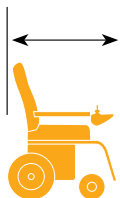

Dynamische Stabilität – Max. Steigfähigkeit

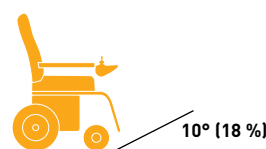

Max. Kantensteigfähigkeit

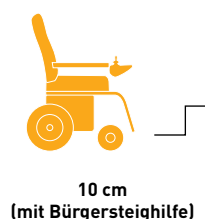

Technische Daten

Geschwindigkeit	6 km/h	Steuerung	VR2 Standard
Max. Reichweite	25 km (ISO 7176-4)*	Kompatible Teile mit Salsa	Elektronik
Batterien	40 / 50 Ah	Gesamtgewicht (mit Batterien)	100 kg
Wendekreis	130 cm	Max. Zuladung	140 kg (125 kg mit elektr. Optionen)

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.04.0127 (Außenbereich) / 18.46.05.1019 (Innenbereich)

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung auf unserer Internetseite. Fragen beantwortet Ihnen auch gerne der Sunrise Medical Kundenservice. Diese Unterlage können Sie auch unter www.SunriseMedical.de im PDF-Format in größerer Schrift ansehen.

*Kann sich abhängig von Streckenprofil, Nutzergewicht und elektrischen Optionen reduzieren.



Sunrise Medical GmbH & Co. KG

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de