

PRIMUS ML 2.0 Leichtgewichtrollstuhl | HMV-Nr. 18.50.02.2116



Modellvariante Standard mit Trommelbremse



Modellvariante Komfort mit Trommelbremse

Der Leichtgewichtrollstuhl Primus ML 2.0 steht für eine weitere kosteneffiziente Lösung in unserem Standard Rollstuhlprogramm. Die Anforderungen der Kostenträger nach immer wirtschaftlicheren Lösungen bei annähernd gleichen Ausstattungsprofilen der Produkte haben uns veranlasst, dort wo es sinnvoll ist, z. B. auch andere Materialien zu verarbeiten andererseits aber auch im Komfortbereich gerade die Leistung anzubieten, die der Leistungserbringer als erforderlich vorgibt. Seitenteile, Armlehnen, Beinstützen, Antriebs- und Lenkräder, Bremsen: alle Details in bekannter und bewährter Qualität.

Der Primus ML 2.0 ist ein Rollstuhl, der bereits in seiner Grundausstattung alles bieten kann, was der Rollstuhlfahrer braucht: mit einer Sitzhöhe von 42,5 bis 53 cm ist er für die meisten Körpergrößen individuell einstellbar. Er ist lieferbar in 7 Sitzbreiten von SB 38 bis SB 52 cm. Die Standardsitztiefe beträgt 42 cm, die Rückenlehnenhöhe ist in den meisten Fällen mit 42 cm passend gewählt. Aufgrund der Konstruktion dieses Rollstuhls ist eine Verlängerung des Radstands um 9 cm möglich, und damit ist die Kippsicherheit beispielsweise auch für beinamputierte Menschen gegeben.

Pannensichere 6-fach höhenverstellbare Lenkräder in den Abmessungen 7" x 1¾" gehören beim Primus ML 2.0 ebenso zum Standard, wie auch die pannensichere Bereifung der 24" Antriebsräder. Zurückklappbare und abnehmbare Seitenteile, in der Höhe 2-fach einstellbar mittels der mitgelieferten Distanzbuchsen und durch Umsetzen der Armlehnen als Lang- und Kurzauf-lage nutzbar, gehören bereits zur Basisausstattung dieses Rollstuhls. Auch die stufenlos verlängerbaren, abnehmbaren und schwenkbaren Beinstützen mit winkelverstellbaren Fußplatten mit Fersenbändern sind Standard beim Primus ML 2.0.

Die maximale Belastung beträgt 130 kg. Lieferbar ist ein sinnvoll ausgewähltes Zubehörprogramm.



**Einstellmöglichkeit
Lenkräder**



**Einstellmöglichkeit
Antriebsrad**



**Komfortarmlehne mit
Höheneinstellung**

Stand 09/2018

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mobil, wie ich es will.

Technische Daten HMV-Nr. 18.50.02.2116

Abmessungen und Gewichte

Sitzbreite	38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 50 / 52 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	Werkseinstellung 51 cm, Einstellbar auf 45 und 48,5 cm
Sitzwinkel	4°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 20 cm
Gesamtlänge	99 cm
Gesamthöhe	84 - 96 cm (mit Schiebegriffen)
Rückenlehnenhöhe	40 cm
Rückenwinkel	5°
Leergewicht	16,1 kg
Maximale Belastbarkeit	130 kg



Winkelverstellbare Beinstütze



Schiebegrifferhöhung

Räder


Antriebsräder	24" x 1 3/8" PU (pannensicher) entspricht 540 x 37 mm
Lenkräder	7" x 1 3/4" PU (pannensicher) entspricht 175 x 32 mm

Fahreigenschaften

Kippstabilität	10°
----------------	-----

Grundausrüstung

- Geprüft und zertifiziert nach ISO 7176-19 zur Montage von Kraftknoten
- Schiebegriffe
- Armlehnen 2-fach höhen- und längenverstellbar
- Seitenteile abnehmbar und zurückklappbar
- Fußplatten, winkelverstellbar mit Fersenhalterungen
- Beinstützen abnehmbar und schwenkbar
- Beidseitige Ankipphilfen
- Feststellbremse mit Quetschschutz
- Blindstopfen für Beinstützen und Gebrauchsanweisung

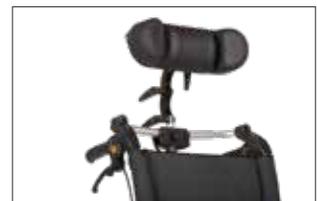

Einstelloptionen Kopfstütze

Zubehör

- Trommelbremse für Begleitperson
- Seitenteil „Komfort“ 7-fach höhenverstellbar
- Winkelverstellbare Beinstützen
- Amputationsstützen
- Kopfstütze mit Anbausatz (SB 43-56)
- Erhöhung für Schiebegriffe
- Therapietisch
- Stockhalter
- Komfortpaket bestehend aus: Ankippstützen, Stockhalter, Sicherheitsgurt und Sitzkissen
- Sicherheitsgurt
- Umrüstsatz - Radstandsverlängerung
- Speichenschutz, transparent
- Anti-Kippstützen
- Lenkradgabel kurz für Lenkrad 150x32 mm
- Lenkräder 150x32 mm (pannensicher)
- Beinstütze waagrecht verstellbar
- Anpasserrücken mit Rückenkissen
- Sitzkissen 38 - 52 x 42 x 5 cm



Schiebehilfe Anbau mögl.